


SETidentity®

Mit der SETidentity® identifizieren Sie jetzt Ihre Instrumente und dokumentieren die Anwendung.

Die SETidentity® ist eine runde, drehbare Box zur Aufnahme von zehn Instrumenten. Es kann jeweils nur ein Bohrer entnommen werden. Das Instrument wird nach dem Gebrauch in einer Zwischenablage im Inneren der Box abgelegt. Es wird nun in einem separaten Gefäß, gefüllt mit z. B. Chlorhexidin, gereinigt. Durch Drehen am äußeren Rand der Box wird das nächste Instrument angewählt. Über Funk oder durch ein Kabel wird die Positionsänderung und die Instrumentenwahl an einen Endomotor gegeben, z. B. den S.E.T.-EndoStepper®.

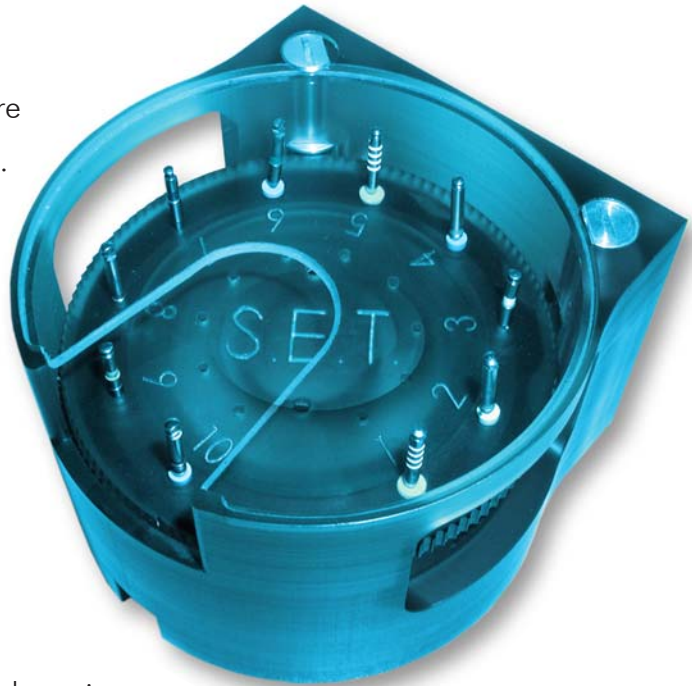

Der Motor stellt sich automatisch auf das gewählte Instrument ein und gibt die bohrerspezifischen Daten frei. Der Computer zählt mit, wie oft das Instrument benutzt wurde und warnt bei Materialermüdung vor erneuter Benutzung des Bohrers. Einfach zu transportieren durch Drehung in die Nullposition. Der Deckel aus Glas sorgt dafür, dass kein Instrument herausfallen kann. Alle Teile sind einfach zu demonstrieren und zu reinigen. Die Box sowie die Transferbox aus Ultem sind bei 135° C sterilisierbar.

Die Vorteile auf einen Blick

- vollautomatische Erkennung u. übersichtliche Verwaltung der Instrumente
- Identifizierung der Bohrer und deren Anzahl der Anwendungen
- zusätzliche Einstellungen am Motor entfallen
- kabelloser Betrieb über Funk möglich
- autoklavierbar
- verwendbar auch für andere Instrumente und Bohrer

SET identity®



Artikelnummer

11001-01

Bestellung per Fax: 0 8142/4 44 56 30

Ja, ich möchte SET identity® für S.E.T.-EndoStepper bestellen:

- ☐ SET identity® komplett
ohne Funk inclusive software-update € 390,- + MwSt
- ☐ SET identity® komplett
mit Funk inclusive software-update € 490,- + MwSt
- ☐ SET identity® komplett mit
Apex-Locator und 1 Box
ohne Funk inclusive software-update € 990,- + MwSt
- ☐ SET identity® komplett mit
Apex-Locator und 1 Box
mit Funk inclusive software-update € 1.190,- + MwSt
- ☐ SET identity® Box € 99,- + MwSt

Ja, ich möchte SET identity® als „stand alone Version“ bestellen:

- ☐ SET identity® komplett mit
Apex-Locator und 1 Box € 1.190,- + MwSt
- ☐ SET identity® komplett mit 1 Box € 390,- + MwSt

Bei Bestellung des SET identity® **mit Funk** teilen Sie uns bitte Ihre S.E.T.-EndoStepper® Seriennummer mit.
Diese befindet sich auf dem weißen Etikett unterhalb des Strichcodes.

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Seriennummer

Stand: März 2003



S. E. T.

SYSTEMVERTRIEB FÜR
ENDOTECHNISCHE
GERÄTE GMBH

Johann-G.-Gutenberg-Straße 20 · D-82140 Olching · Germany
Tel: (+49) 81 42/4 44 56-0 · Fax: (+49) 81 42/4 44 56-30
E-mail: info@set-dental.de · www.set-dental.de · www.endostepper.de